


2,85 cm

8 cm

8 cm

8 cm

2,85 cm

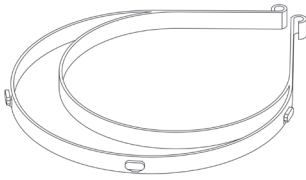

Gestell Brüssel 888 mit Halter für A4 Folien als Visier, Lochung 888



Anzahl

Verpackt am

thingiverse.com/thing:4239203, github.com/erfindergarden/brussel-faceshield

MATERIAL GESTELL: PETG, PLA, ABS oder ASA

- nicht über 60 °C erhitzen
- nicht spülmaschinenfest
- dezentral hergestellt von ehrenamtlichen Helfern im 3D-Druck Verfahren mit Drucktemperatur von 200-250 °C

MATERIAL VISIER: PVC DIN A4 Folie

- gelocht mit 4 Löchern mit 3 Abständen à 80 mm
- zum Nachbestellen von Visieren suchen Sie nach Einbanddeckel, Klarsichtfolie A4 0.2 mm oder 0.25 mm oder nach PVC Deckblättern

HERSTELLERHINWEIS

Gestell und Visiere sind nicht steril und nicht desinfiziert, keine Gewährleistung, Benutzung auf eigene Gefahr, Gestell und Visiere werden kostenlos an systemrelevante Organisationen abgegeben

BEREITS GENUTZT VON

CHU Saint-Pierre Bruxelles, München Klinik Schwabing, Caritas München, Pflegeheim Entenbach, Wolfartklinik Gräfelfing

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR EINE PERSON

- 1 x Folie A4 (wenn noch nicht gelocht, dann Anleitung unten folgen)
- 2 x 80x1 mm Gummiringe (wenn noch nicht vorbereitet, dann Anleitung folgen)

OPTIONALES WERKZEUG





- 1 x Locher mit Anschlagsschiene
- 1 x Schere

Schritt 1

+ Optional

Schritt 2

Schritt 3

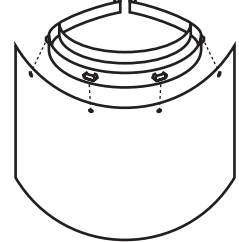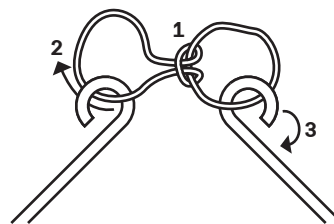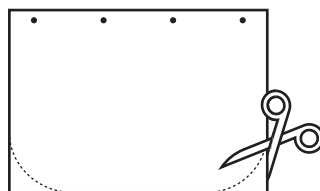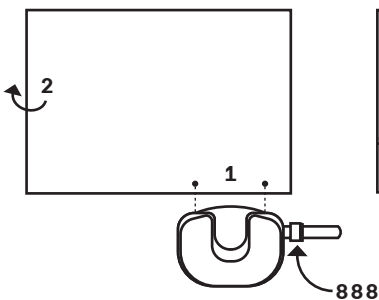

VARIANTE FÜR VIERFACHLOCHER

Lochen Sie die Folie einmal an der Längsseite.

VARIANTE FÜR ZWEIFACHLOCHER

Stellen Sie die Anschlagsschiene des Lochers auf „888“. Lochen Sie die Folie einmal an ihrer Längsseite (1). Wenden Sie die Folie und wiederholen Sie die Lochung an der selben Längsseite, sodass 4 Löcher im Abstand von 8 cm entstehen (2).

Runden Sie die Ecken der ungelochten Seite der Folie mit der Schere ab. Nehmen Sie die Markierungen auf diesem Blatt als Vorlage.

Verbinden Sie die beiden Gummiringe (per Knoten oder Ankerstich) miteinander (1) und hängen Sie die Schlaufen in beide Haken der Kopfhalterung ein (2). Knicken Sie die Haken dann so nach innen, dass die Gummis nicht mehr herausrutschen können (3).

Zuletzt die Folie an der Kopfhalterung anbringen, indem Sie die vier Löcher in die entsprechenden Noppen der Kopfhalterung einklicken. **Ready to go!**

MakerVsVirus
Sammelstelle

